

Unitron TrueFit™ fitting software

Successful fittings. Simplified.

Erfolgreiche Anpassungen. Ganz einfach.

Des appareillages réussis. Simplifiés.

Adaptaciones correctas. Simplificado.

Unitron TrueFit v5.5



Installation Guide / Installations-Anleitung / Guide d'installation / Guía de instalación

Table of contents / Inhalt / Table des matières / Índice

English.....	2
System Requirements.....	3
Deutsch.....	4
Empfohlenes System	5
Français.....	6
Systèmes recommandés	7
Español	8
Sistemas recomendados	9
Need assistance?/ Benötigen Sie Hilfe? / Besoin d'aide ? /¿Necesita ayuda?	10

Installing Unitron TrueFit Software

1. Insert the Unitron TrueFit disk/USB or download and extract the installation file.
 - If the installation program does not start automatically, double click on setup.exe from the fitting software disk/USB or in the downloaded folder.
 - Follow the displayed step by step instructions. InstallShield installs the fitting software on your PC.
2. Select the preferred installation language: English, French, German or Dutch (for the installation procedure only) and click **OK**.
3. If additional Microsoft software components are required, they will be listed. Click **Install** to install them. If you are prompted to reboot, please follow the step-by-step instructions.
4. When the InstallShield Wizard appears, click **Next >**.
5. Read the license agreement and accept it to continue the installation process. Click **Next >**.
6. When the User Settings dialog appears, follow the instructions on the screen to select your country, your language and the installation type. Click **Next >**.
 - If NOAH 4 is installed, you can choose to install Unitron TrueFit under NOAH or Standalone, otherwise Standalone will be pre-selected.
7. Choose **Next >** on the Custom Setup screen to install all features in the default location, or follow the instruction to make changes.
8. Choose **Install** to begin the installation.
9. When prompted, select **Finish** to complete the installation.

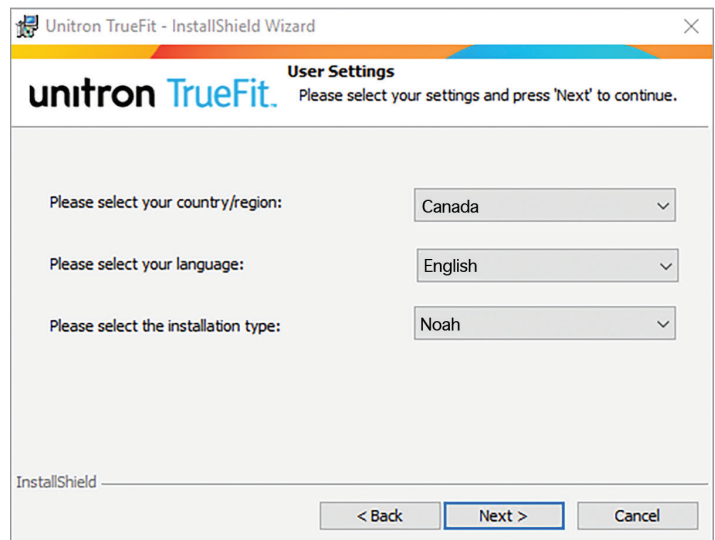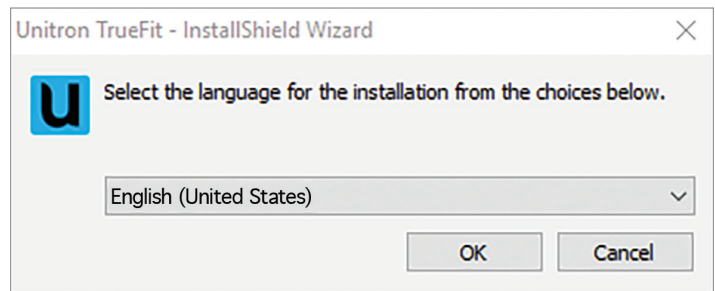


System Requirements

Processor	Intel Core or higher performance
RAM	8 GB or more
Hard disk space	4 GB or more
Operating systems supported	› Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education › Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Display resolution	1280 x 1024 pixels
Patient secondary display resolution	1366 x 768 pixels
Graphic card	16 Million (24 bit) screen colors or more
Drive for manual software installation	› DVD › USB
Serial COM port	One for HI-PRO if used via serial COM port
USB ports	One for each purpose: › Bluetooth adaptor › Accessory programming › HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
Programming interfaces	› iCube II › NOAHlink / Noahlink Wireless › HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink driver	Latest version available
NOAHlink Wireless driver	Latest version available
Internet connection	Highly recommended
Sound card	Stereo
Playback system	20 Hz – 14 kHz
Noah version	Latest version (Noah 4.4 or higher) Please check the Noah limitations for Windows operating systems on http://www.himsa.com
Automatic REM	Noah Version 4.4.2280 or higher Natus Otosuite 4.81.00 or higher Natus Aurical FreeFit for REM & Aurical HIT for test box measurements

Installation der Unitron TrueFit Anpasssoftware

1. Laden Sie die Installationsdatei herunter und extrahieren Sie sie.
 - Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, machen Sie einen Doppelklick auf die Datei setup.exe im heruntergeladenen und entpackten Ordner.
 - Folgen Sie den angezeigten Schritt-für-Schritt-Anweisungen. InstallShield installiert die Anpasssoftware auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie die gewünschte Installationssprache: Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch (nur für den Installationsvorgang) und klicken Sie auf **OK**.
3. Wenn zusätzliche Microsoft-Softwarekomponenten erforderlich sind, werden diese aufgelistet. Klicken Sie auf **Installieren**, um sie zu installieren. Wenn Sie zu einem Neustart aufgefordert werden, folgen Sie bitte den schrittweisen Anweisungen.
4. Wenn der InstallShield-Assistent erscheint, klicken Sie auf **Weiter >**.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie sie, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Klicken Sie auf **Weiter >**.
6. Wenn das Dialogfeld „Benutzereinstellungen“ angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Land, Ihre Sprache und die Installationsart auszuwählen. Klicken Sie auf **Weiter >**.
 - Wenn NOAH 4 installiert ist, können Sie wählen, ob die Unitron TrueFit unter NOAH oder Standalone installiert werden soll, andernfalls ist Standalone voreingestellt.
7. Wählen Sie **Weiter >** auf dem Bildschirm „Benutzerdefiniertes Setup“, um alle Funktionen am Standardspeicherort zu installieren, oder folgen Sie den Anweisungen, um Änderungen vorzunehmen.
8. Wählen Sie **Installieren**, um die Installation zu starten.
9. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.


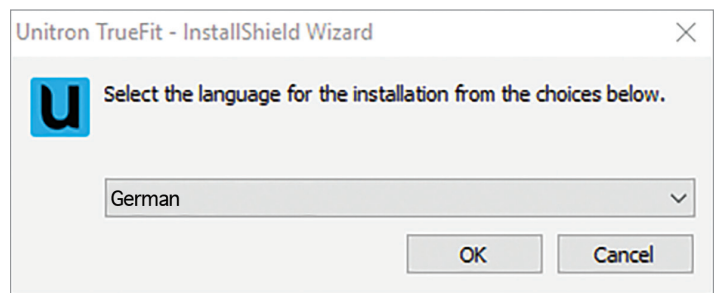


Empfohlenes Systems

Prozessor	Intel Core oder höhere Leistung
RAM	8 GB oder mehr
Freier Festplattenspeicher	4 GB oder mehr
Betriebssystem	› Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education › Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixel
Kundenansicht	1366 x 768 Pixel
Grafikkarte	16 Mio. (24 Bit) Farben oder mehr
Laufwerk für manuelle Softwareinstallation	› DVD › USB
Serieller COM-Port	1x für HI-PRO, wenn via seriellem COM-Port angeschlossen
USB Ports	1x für jede Anwendung: › Bluetooth-Adapter › Programmierung Zubehör › HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
Programmierschnittstellen	› iCube II › NOAHlink / Noahlink Wireless › HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink-Treiber	Neueste Version verfügbar
NOAHlink Wireless-Treiber	Neueste Version verfügbar
Internetverbindung	Empfohlen
Soundkarte	Stereo
Wiedergabesystem	20 Hz – 14 kHz
Noah-Version	Neueste Version (ab NOAH 4.4) Beachten Sie bitte die NOAH Limitationen für Windows-Betriebssystemen auf http://www.himsa.com
Automatic REM	Noah Version 4.4.2280 oder höher Natus Otosuite 4.81.00 oder höher Natus Aurical FreeFit für REM & Aurical HIT für Messungen in der Messbox

Installation du logiciel Unitron TrueFit

1. Insérez le disque/la clé USB Unitron TrueFit ou téléchargez et extrayez le fichier d'installation.
 - Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier setup.exe qui se trouve sur le disque/clé USB du logiciel d'appareillage ou dans le dossier téléchargé.
 - Suivez les instructions pas à pas affichées. InstallShield installe le logiciel d'appareillage sur votre PC.
2. Sélectionnez la langue d'installation préférée : Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais (pour la procédure d'installation uniquement) et cliquez sur **OK**.
3. Si des composants logiciels Microsoft supplémentaires sont nécessaires, ils seront répertoriés. Cliquez sur **Installer** pour les installer. Si vous êtes invité à redémarrer, suivez les instructions pas à pas.
4. Lorsque l'assistant InstallShield Wizard apparaît, cliquez sur **Suivant >**.
5. Lisez le contrat de licence et acceptez-le pour poursuivre le processus d'installation. Cliquez sur **Suivant >**.
6. Lorsque la boîte de dialogue Réglages utilisateur apparaît, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre pays, votre langue et le type d'installation. Cliquez sur **Suivant >**.
 - Si NOAH 4 est installé, vous pouvez choisir d'installer Unitron TrueFit sous NOAH ou Standalone, sinon Standalone sera présélectionné.
7. Choisissez **Suivant >** dans l'écran Installation personnalisée pour installer toutes les fonctionnalités à l'emplacement par défaut, ou suivez les instructions pour apporter des modifications.
8. Choisissez **Installer** pour commencer l'installation.
9. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Terminer** pour achever l'installation.

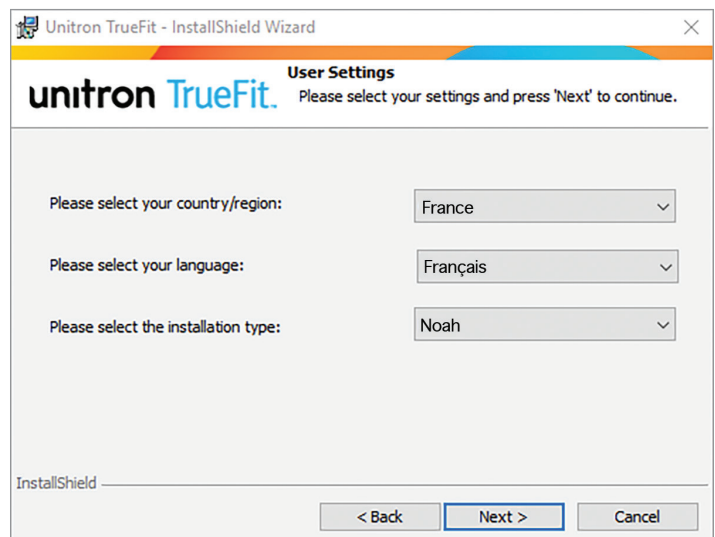
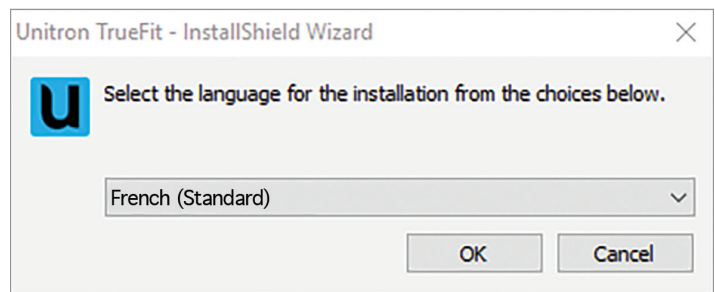


Systèmes recommandés

Processeur	Intel Core ou plus performant
RAM	8 GB ou plus
Espace libre sur le disque dur	4 GB ou plus
Systèmes d'exploitation compatibles	› Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education › Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Résolution écran	1280 x 1024 pixels
Résolution écran patient	1366 x 768 pixels
Carte graphique	16 millions de couleurs (24 bits) ou plus
Disque pour l'installation manuelle du logiciel	› DVD › USB
Port COM série	Un pour HI-PRO s'il est connecté via le port COM série
Ports USB	Un pour chaque usage : › Adaptateur Bluetooth › Programmation des accessoires › HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
Interfaces de programmation	› iCube II › NOAHlink / Noahlink Wireless › HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Pilote pour NOAHlink	Dernière version disponible
Pilote pour NOAHlink Wireless	Dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Carte son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version de Noah	Dernière version (NOAH 4.4 ou ultérieure) Vérifiez les limitations de NOAH pour les systèmes d'exploitation Windows sur http://www.himsa.com
REM Automatique	Noah Version 4.4.2280 ou supérieure Natus Otosuite 4.81.00 ou supérieure Natus Aurical FreeFit pour Mesures In-Vivo & Aurical HIT pour mesures en chaîne de mesures

Guía de Instalación del software Unitron TrueFit

1. Inserte el disco/USB Unitron TrueFit o descargue y extraiga el archivo de instalación.
 - Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en setup.exe desde el disco/USB del software correspondiente o en la carpeta descargada
 - Siga las instrucciones paso a paso que se muestran. InstallShield instala el software de adaptación en su PC.
2. Seleccione el idioma de instalación preferido: inglés, francés, alemán u holandés (solo para el procedimiento de instalación) y haga clic en **Aceptar**.
3. Si se requieren componentes de software de Microsoft adicionales, se enumerarán. Haga clic en **Instalar** para instalarlos. Si se le solicita que reinicie, siga las instrucciones paso a paso.
4. Cuando aparezca el asistente InstallShield, haga clic en **Siguiente**.
5. Lea el acuerdo de licencia y acéptelo para continuar con el proceso de instalación. Haga clic en **Siguiente**.
6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Configuración de usuario, siga las instrucciones en pantalla para seleccionar su país, su idioma y el tipo de instalación. Haga clic en **Siguiente**.
 - Si NOAH 4 está instalado, puede optar por instalar Unitron TrueFit en NOAH o Independiente; de lo contrario, se preseleccionará Independiente.
7. Elija **Siguiente** en la pantalla Configuración personalizada para instalar todas las funciones en la ubicación predeterminada o siga las instrucciones para realizar cambios.
8. Elija **Instalar** para comenzar la instalación.
9. Cuando se le solicite, seleccione **Finalizar** para completar la instalación.

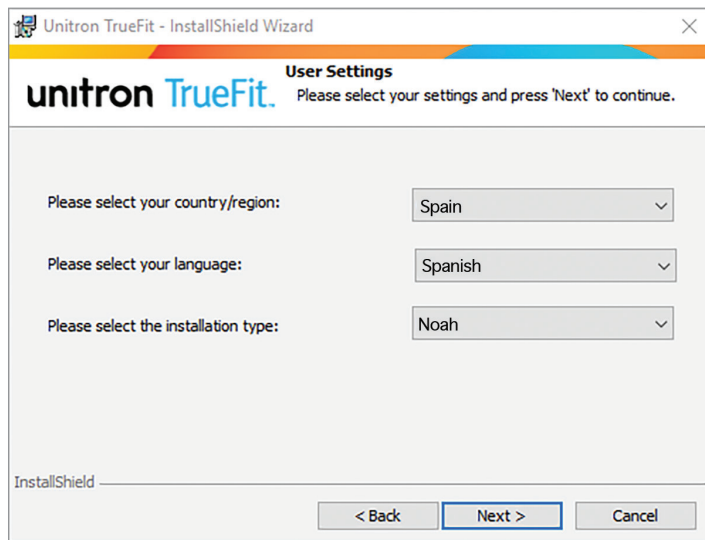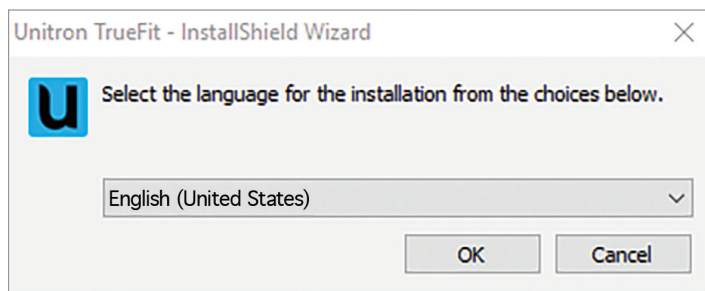

Sistemas recomendados

Procesador	Intel Core o superior
RAM	8 GB o más
Espacio en disco duro	4 GB o más
Compatible con los siguientes Sistemas Operativos	› Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education › Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Resolución de pantalla	1280 x 1024 píxeles
Segunda pantalla del paciente	1366 x 768 píxeles
Tarjeta gráfica	16 millones de colores en pantalla (24 bits) o más
Unidad para instalación manual de software	› DVD › USB
Puerto COM serie	Uno para HI-PRO si se usa a través de puerto COM serie
Puertos USB	Uno para cada propósito: › Adaptador Bluetooth › Programación adicional › HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
Interfaces de programación	› iCube II › NOAHlink / Noahlink Wireless › HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Controlador NOAHlink	Última versión disponible
Controlador NOAHlink Wireless	Última versión disponible
Conexión a Internet	Muy recomendable
Tarjeta de sonido	Estéreo
Sistema de reproducción	20 Hz – 14 kHz
Versión de Noah	Última versión (NOAH 4.4 o posterior) Compruebe las limitaciones NOAH para sistemas operativos con Windows en http://www.himsa.com
REM Automático	Noah Version 4.4.2280 o superior Natus Otosuite 4.81.00 o superior Natus Aurical FreeFit para REM & Aurical HIT para mediciones de cajas de prueba

Need assistance?/ Benötigen Sie Hilfe? / Besoín d'aide ? /¿Necesita ayuda?

Australia - 1800 212 313
Austria - +49 711 658538 0
Belgium - +31 88 600 88 10
Brazil - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Denmark - +45 64 41 78 87
France - 04 26 23 22 00
Germany - +49 711 658538 0
India - +91-22-26871151
Mexico - +52 55 5207 1703

Netherlands - +31 88 600 88 10
New Zealand - 0800 864 8766
Russia - +7 495 788 02 04
South Korea - +82 2 859 4902
Spain - +34 902 494 960
Sweden - +46 (0) 8 546 20 960
Switzerland - 0800 928 800
Taiwan - +886 2 22216722
Turkey - +90 212 232 67 22
U.K. and Ireland - +44 (0) 1925 247810
U.S. - 1 800 888 8882

For countries not listed - +1 519 895 0100
Für nicht aufgeführte Länder - +1 519 895 0100
Pour les pays non listés - +1 519 895 0100
Para países no listados: +1 519 895 0100

 Instructions are available at www.unitron.com/instr
Die Installationsanleitung ist auf www.unitron.com/instr
Les instructions sont disponibles sous www.unitron.com/instr
Las instrucciones están disponibles en www.unitron.com/instr



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Importer for European Union:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

REF 058-5178-055



sonova
HEAR THE WORLD