

Unitron TrueFit™ fitting software

Successful fittings. Simplified.

Erfolgreiche Anpassungen. Ganz einfach.

Des appareillages réussis. Simplifiés.

Adaptaciones correctas. Simplificado.

Unitron TrueFit™ v5.9



Installation Guide / Installations-Anleitung / Guide d'installation / Guía de instalación

Table of contents / Inhalt / Table des matières / Índice

English	2
System Requirements	3
Deutsch.....	4
Empfohlenes System.....	5
Français.....	6
Systèmes recommandés	7
Español	8
Sistemas recomendados	9
Need assistance?/ Benötigen Sie Hilfe? / Besoin d'aide ? /¿Necesita ayuda?	10

Installing Unitron TrueFit Software

1. Insert the Unitron TrueFit USB or download and extract the installation file.
 - If the installation program does not start automatically, double click on setup.exe from the Unitron fitting software USB or in the downloaded folder.
 - Follow the displayed step by step instructions. InstallShield installs the fitting software on your PC.
2. Select the preferred installation language: English, French, German or Dutch (for the installation procedure only) and click **OK**.
3. If additional Microsoft software components are required, they will be listed. Click **Install** to install them. If you are prompted to reboot, please follow the step-by-step instructions.
4. When the InstallShield Wizard appears, click **Next >**.
5. Read the license agreement and accept it to continue the installation process. Click **Next >**.
6. When the User Settings dialog appears, follow the instructions on the screen to select your country, your language and the installation type. Click **Next >**.
 - If Noah 4™ is installed, you can choose to install Unitron TrueFit under Noah or Standalone, otherwise Standalone will be pre-selected.
7. Choose **Next >** on the Custom Setup screen to install all features in the default location, or follow the instruction to make changes.
8. Choose **Install** to begin the installation.
9. When prompted, select **Finish** to complete the installation.

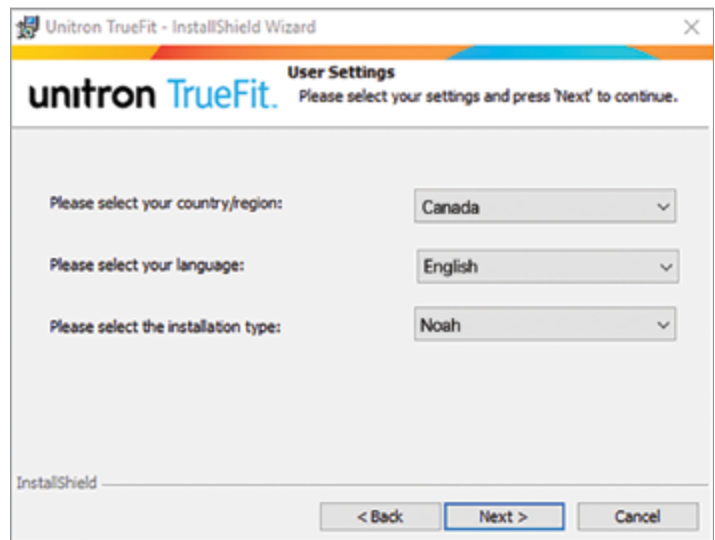
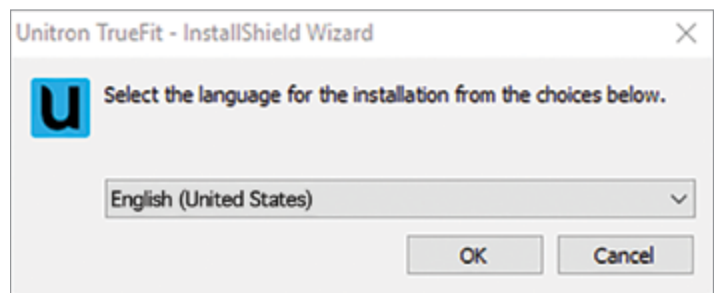


System Requirements

Operating systems supported	> Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education > Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Processor	Intel Core or higher performance
RAM	8 GB or more
Hard disk space	4 GB or more
Display resolution	1280 x 1024 pixels
Patient secondary display resolution	1366 x 768 pixels
Graphic card	16 Million (24 bit) screen colors or more
Drive for manual software installation	> USB
Serial COM port	One for HI-PRO if used via serial COM port
USB ports	One for each purpose: > Bluetooth adaptor > Accessory programming > HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2
Programming interfaces	> iCube II > NOAHlink / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 > HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink driver	Latest version available
Noahlink Wireless driver	Latest version available
Internet connection	Highly recommended
Sound card	Stereo
Playback system	20 Hz – 14 kHz
Noah version	Latest version (Noah 4.4 or higher) Please check the Noah limitations for Windows operating systems on http://www.himsa.com
Automatic REM	Noah version 4.4.2280 or higher Auditdata Measure version 6.0 or higher Auditdata Primus version 4.1 or higher Interacoustics Affinity Suite version 2.19 or higher (excludes 2.20) Interacoustics Callisto Suite version 1.20 or higher MedRX Studio version 1.2.1 or higher Natus® Otosuite version 4.82 and higher Signia Unity 3 version 5.9 or higher Signia Unity 4 version 6.0 or higher

Installation der Unitron TrueFit Anpasssoftware

1. Laden Sie die Installationsdatei herunter und extrahieren Sie sie.
 - Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, machen Sie einen Doppelklick auf die Datei setup.exe im heruntergeladenen und entpackten Ordner.
 - Folgen Sie den angezeigten Schritt-für-Schritt-Anweisungen. InstallShield installiert die Anpasssoftware auf Ihrem PC.
2. Wählen Sie die gewünschte Installationssprache: Englisch, Französisch, Deutsch oder Niederländisch (nur für den Installationsvorgang) und klicken Sie auf **OK**.
3. Wenn zusätzliche Microsoft-Softwarekomponenten erforderlich sind, werden diese aufgelistet. Klicken Sie auf **Installieren**, um sie zu installieren. Wenn Sie zu einem Neustart aufgefordert werden, folgen Sie bitte den schrittweisen Anweisungen.
4. Wenn der InstallShield-Assistent erscheint, klicken Sie auf **Weiter >**.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie sie, um den Installationsvorgang fortzusetzen. Klicken Sie auf **Weiter >**.
6. Wenn das Dialogfeld „Benutzereinstellungen“ angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Land, Ihre Sprache und die Installationsart auszuwählen. Klicken Sie auf **Weiter >**.
 - Wenn Noah 4™ installiert ist, können Sie wählen, ob die Unitron TrueFit unter Noah oder Standalone installiert werden soll, andernfalls ist Standalone voreingestellt.
7. Wählen Sie **Weiter >** auf dem Bildschirm „Benutzerdefiniertes Setup“, um alle Funktionen am Standardspeicherort zu installieren, oder folgen Sie den Anweisungen, um Änderungen vorzunehmen.
8. Wählen Sie **Installieren**, um die Installation zu starten.
9. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

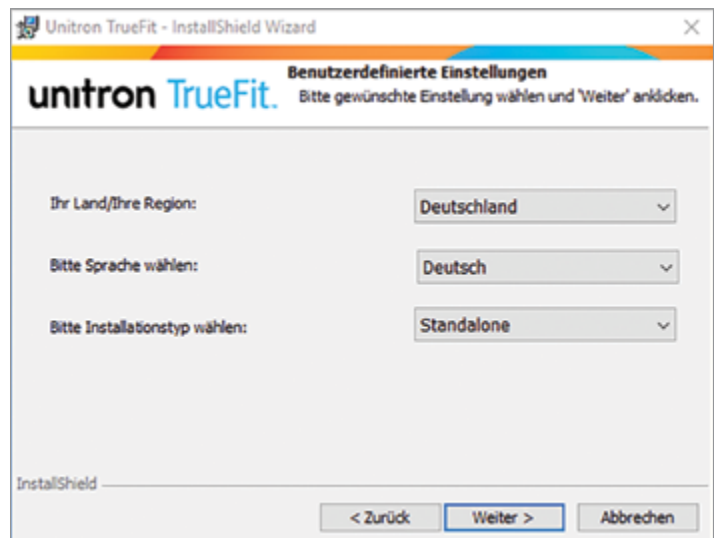
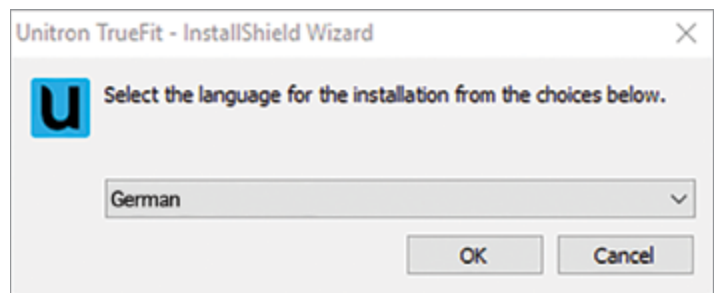


Empfohlenes Systems

Betriebssystem	> Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education > Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Prozessor	Intel Core oder höhere Leistung
RAM	8 GB oder mehr
Freier Festplattenspeicher	4 GB oder mehr
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixel
Kundenansicht	1366 x 768 Pixel
Grafikkarte	16 Mio. (24 Bit) Farben oder mehr
Laufwerk für manuelle Softwareinstallation	> USB
Serieller COM-Port	1x für HI-PRO, wenn via seriellen COM-Port angeschlossen
USB Ports	1x für jede Anwendung: > Bluetooth-Adapter > Programmierung Zubehör > HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2
Programmierschnittstellen	> iCube II > NOAHlink / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 > HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink-Treiber	Neueste Version verfügbar
Noahlink Wireless-Treiber	Neueste Version verfügbar
Internetverbindung	Empfohlen
Soundkarte	Stereo
Wiedergabesystem	20 Hz – 14 kHz
Noah-Version	Neueste Version (ab NOAH 4.4) Beachten Sie bitte die NOAH Limitationen für Windows-Betriebssystemen auf http://www.himsa.com
Automatic REM	Noah version 4.4.2280 oder höher Auditdata Measure version 6.0 oder höher Auditdata Primus version 4.1 oder höher Interacoustics Affinity Suite version 2.19 oder höher (nicht verfügbar für 2.20) Interacoustics Callisto Suite version 1.20 oder höher MedRX Studio version 1.2.1 oder höher Natus® Otosuite version 4.82 oder höher Signia Unity 3 version 5.9 oder höher Signia Unity 4 version 6.0 oder höher

Installation du logiciel Unitron TrueFit

1. Insérez la clé USB Unitron TrueFit ou téléchargez et extrayez le fichier d'installation.
 - Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le fichier setup.exe qui se trouve sur clé USB du logiciel d'appareillage ou dans le dossier téléchargé.
 - Suivez les instructions pas à pas affichées. InstallShield installe le logiciel d'appareillage sur votre PC.
2. Sélectionnez la langue d'installation préférée : Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais (pour la procédure d'installation uniquement) et cliquez sur **OK**.
3. Si des composants logiciels Microsoft supplémentaires sont nécessaires, ils seront répertoriés. Cliquez sur **Installer** pour les installer. Si vous êtes invité à redémarrer, suivez les instructions pas à pas.
4. Lorsque l'assistant InstallShield Wizard apparaît, cliquez sur **Suivant >**.
5. Lisez le contrat de licence et acceptez-le pour poursuivre le processus d'installation. Cliquez sur **Suivant >**.
6. Lorsque la boîte de dialogue Réglages utilisateur apparaît, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre pays, votre langue et le type d'installation. Cliquez sur **Suivant >**.
 - Si Noah 4™ est installé, vous pouvez choisir d'installer Unitron TrueFit sous Noah ou Standalone, sinon Standalone sera présélectionné.
7. Choisissez **Suivant >** dans l'écran Installation personnalisée pour installer toutes les fonctionnalités à l'emplacement par défaut, ou suivez les instructions pour apporter des modifications.
8. Choisissez **Installer** pour commencer l'installation.
9. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Terminer** pour achever l'installation.

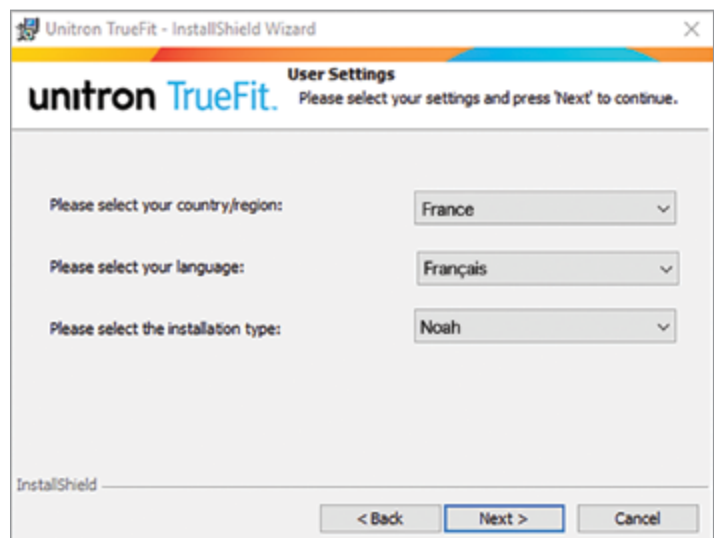
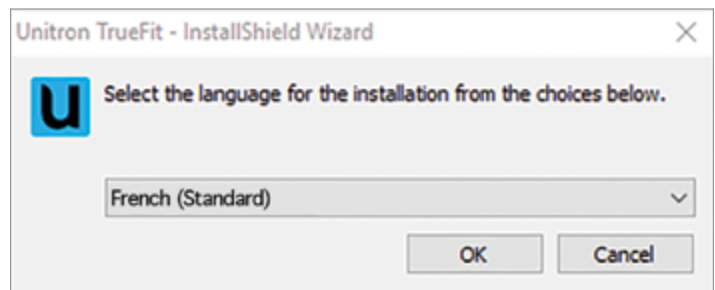


Systèmes recommandés

Systèmes d'exploitation compatibles	> Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education > Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Processeur	Intel Core ou plus performant
RAM	8 GB ou plus
Espace libre sur le disque dur	4 GB ou plus
Résolution écran	1280 x 1024 pixels
Résolution écran patient	1366 x 768 pixels
Carte graphique	16 millions de couleurs (24 bits) ou plus
Disque pour l'installation manuelle du logiciel	> USB
Port COM série	Un pour HI-PRO s'il est connecté via le port COM série
Ports USB	Un pour chaque usage : > Adaptateur Bluetooth > Programmation des accessoires > HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2
Interfaces de programmation	> iCube II > NOAHlink / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 > HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Pilote pour NOAHlink	Dernière version disponible
Pilote pour Noahlink Wireless	Dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Carte son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version de Noah	Dernière version (NOAH 4.4 ou ultérieure) Vérifiez les limitations de NOAH pour les systèmes d'exploitation Windows sur http://www.himsa.com
REM Automatique	Noah version 4.4.2280 ou supérieure Auditdata Measure version 6.0 ou supérieure Auditdata Primus version 4.1 ou supérieure Interacoustics Affinity Suite version 2.19 ou supérieure (excepté 2.20) Interacoustics Callisto Suite version 1.20 ou supérieure MedRX Studio version 1.2.1 ou supérieure Natus® Otosuite version 4.82 ou supérieure Signia Unity 3 version 5.9 ou supérieure Signia Unity 4 version 6.0 ou supérieure

Guía de Instalación del software Unitron TrueFit

1. Inserte el USB Unitron TrueFit o descargue y extraiga el archivo de instalación.
 - Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en setup.exe desde el USB del software correspondiente o en la carpeta descargada
 - Siga las instrucciones paso a paso que se muestran. InstallShield instala el software de adaptación en su PC.
2. Seleccione el idioma de instalación preferido: inglés, francés, alemán u holandés (solo para el procedimiento de instalación) y haga clic en **Aceptar**.
3. Si se requieren componentes de software de Microsoft adicionales, se enumerarán. Haga clic en **Instalar** para instalarlos. Si se le solicita que reinicie, siga las instrucciones paso a paso.
4. Cuando aparezca el asistente InstallShield, haga clic en **Siguiente >**.
5. Lea el acuerdo de licencia y acéptelo para continuar con el proceso de instalación. Haga clic en **Siguiente >**.
6. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Configuración de usuario, siga las instrucciones en pantalla para seleccionar su país, su idioma y el tipo de instalación. Haga clic en **Siguiente >**.
 - Si Noah 4™ está instalado, puede optar por instalar Unitron TrueFit en Noah o Independiente; de lo contrario, se preseleccionará Independiente.
7. Elija **Siguiente >** en la pantalla Configuración personalizada para instalar todas las funciones en la ubicación predeterminada o siga las instrucciones para realizar cambios.
8. Elija **Instalar** para comenzar la instalación.
9. Cuando se le solicite, seleccione **Finalizar** para completar la instalación.

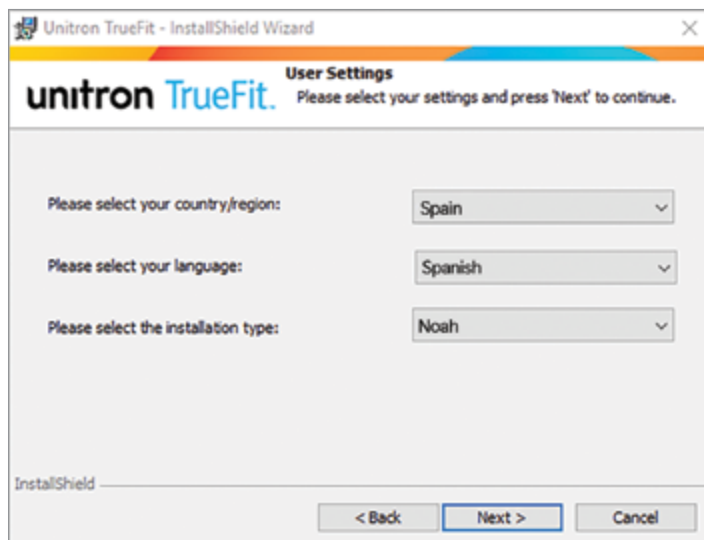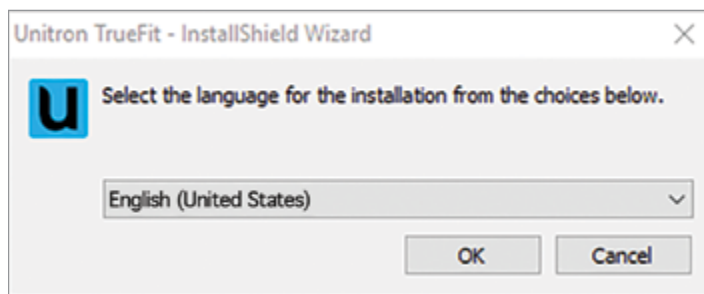

Sistemas recomendados

Compatible con los siguientes Sistemas Operativos	> Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education > Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Procesador	Intel Core o superior
RAM	8 GB o más
Espacio en disco duro	4 GB o más
Resolución de pantalla	1280 x 1024 píxeles
Segunda pantalla del paciente	1366 x 768 píxeles
Tarjeta gráfica	16 millones de colores en pantalla (24 bits) o más
Unidad para instalación manual de software	> USB
Puerto COM serie	Uno para HI-PRO si se usa a través de puerto COM serie
Puertos USB	Uno para cada propósito: > Adaptador Bluetooth > Programación adicional > HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2
Interfaces de programación	> iCube II > NOAHlink / Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2 > HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Controlador NOAHlink	Última versión disponible
Controlador Noahlink Wireless	Última versión disponible
Conexión a Internet	Muy recomendable
Tarjeta de sonido	Estéreo
Sistema de reproducción	20 Hz – 14 kHz
Versión de Noah	Última versión (NOAH 4.4 o posterior) Compruebe las limitaciones NOAH para sistemas operativos con Windows en http://www.himsa.com
REM Automático	Noah version 4.4.2280 o superior Auditdata Measure version 6.0 o superior Auditdata Primus version 4.1 o superior Interacoustics Affinity Suite version 2.19 o superior (excluye 2.20) Interacoustics Callisto Suite version 1.20 o superior MedRX Studio version 1.2.1 o superior Natus® Otosuite version 4.82 o superior Signia Unity 3 version 5.9 o superior Signia Unity 4 version 6.0 o superior

Need assistance? / Benötigen Sie Hilfe? / Besoín d'aide ? / ¿Necesita ayuda?

Australia - 1800 212 313
Austria - +49 711 658538 0
Belgium - +31 88 600 88 10
Brazil - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Denmark - +45 64 41 78 87
France - 04 26 23 22 00
Germany - +49 711 658538 0
India - +91-22-26871151
Mexico - +52 55 5207 1703

Netherlands - +31 88 600 88 10
New Zealand - 0800 864 8766
Russia - +7 495 788 02 04
South Korea - +82 2 859 4902
Spain - +34 902 494 960
Sweden - +46 (0) 8 546 20 960
Switzerland - 0800 928 800
Taiwan - +886 2 22216722
Türkiye - +90 212 232 67 22
U.K. and Ireland - +44 (0) 1925 247810
U.S. - 1 800 888 8882

For countries not listed - +1 519 895 0100
Für nicht aufgeführte Länder - +1 519 895 0100
Pour les pays non listés - +1 519 895 0100
Para países no listados: +1 519 895 0100

 Instructions are available at www.unitron.com/instr
Die Installationsanleitung ist auf www.unitron.com/instr
Les instructions sont disponibles sous www.unitron.com/instr
Las instrucciones están disponibles en www.unitron.com/instr



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Importer for European Union:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

REF 088-5019-00059



sonova
HEAR THE WORLD